

Entraprime®

Airway Management

エントラプライム 気管内チューブ




■ エントラプライム気管内チューブ スタンダード VS

経口 / 経鼻


VentiSeal™

VentiSealカフと従来タイプのカフでは使用時の気管に対する接触面積に差があります。VentiSealカフ付タイプでは、カフの長さによって広面積に圧を分散できます。これにより気管壁にかかる圧を極力低減でき、気管への侵襲を低減できます。

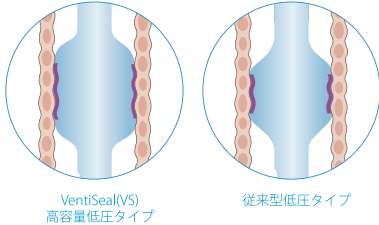

VentiSeal(VS)
高容量低圧タイプ

従来型低圧タイプ

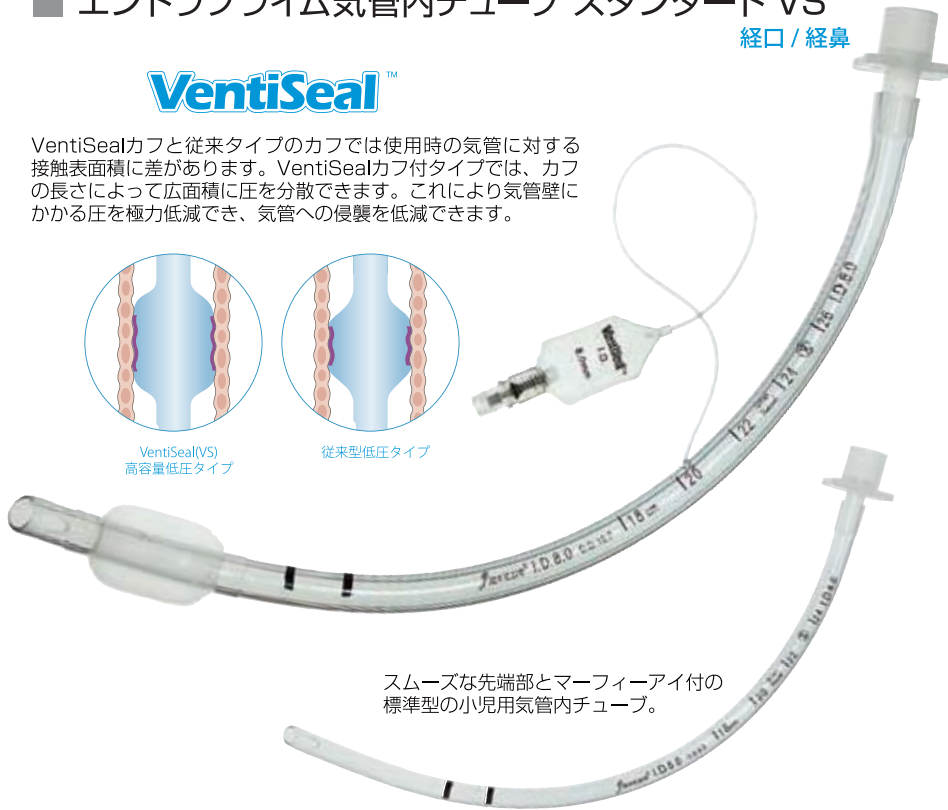

スムーズな先端部とマーフィーアイ付の標準型の小児用気管内チューブ。

製品番号	I.D.(mm)	O.D.(mm)	包装単位
スタンダード VS (ベンチシール)			
971-030	3.0	4.0	
971-035	3.5	4.7	
971-040	4.0	5.3	
971-045	4.5	6.0	
971-050	5.0	6.7	
971-055	5.5	7.3	
971-060	6.0	8.0	
971-065	6.5	8.7	10本/箱
971-070	7.0	9.3	
971-075	7.5	10.0	
971-080	8.0	10.7	
971-085	8.5	11.3	
971-090	9.0	12.0	
971-095	9.5	12.7	
971-100	10.0	13.3	
スタンダード カフなし			
961-025	2.5	3.3	
961-030	3.0	4.0	
961-035	3.5	4.7	
961-040	4.0	5.3	
961-045	4.5	6.0	10本/箱
961-050	5.0	6.7	
961-055	5.5	7.3	
961-060	6.0	8.0	
961-065	6.5	8.7	
961-070	7.0	9.3	

医療機器認証番号 226AFBZX00150000/JMDNコード 14085032

■ エントラプライム気管内チューブ リンフォース VS プラス(スタイレット付) 経口 / 経鼻

挿管中のキックを防ぐためワイヤーで補強しています。平型ワイヤー採用で強度アップ。



▼スタイレット

製品番号	I.D.(mm)	O.D.(mm)	包装単位
リンフォース VS プラス(スタイレット付)			
980-040	4.0	6.0	
980-045	4.5	6.5	
980-050	5.0	7.0	
980-055	5.5	7.7	
980-060	6.0	8.2	
980-065	6.5	8.9	10本/箱
980-070	7.0	9.4	
980-075	7.5	10.1	
980-080	8.0	10.8	
980-085	8.5	11.5	
980-090	9.0	12.2	

医療機器認証番号 226AFBZX00151000/JMDNコード 14085042

■ スタイレット

製品番号	O.D.(mm)	長さ(mm)	包装単位
スタイレット(滅菌済)			
967-022	2.2	225	
967-050	5.0	365	10本/箱

医療機器届出番号 27B1X00002000022/JMDNコード 37469000

製造販売元

代理店



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店: TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店: TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店: TEL092-451-2459・FAX092-451-2419

仙台営業所: TEL022-719-7666・FAX022-719-7654

名古屋営業所: TEL052-741-7124・FAX052-741-7125