

酸素流量計

Flow Gentle

フロージェントルアイハー



院内のパイピング流量計を整理しよう。



株式会社インターメド ジャパン



看護の現場で幅広く活躍する酸素流量計、フロージェントルアイハー。



12 10 9 8 7 6 5 4 3 2.5 2 1.5 1 0.75 0.5 0.25



18チャンネルの幅広い流量設定。

流量は、0.25L/min～15L/minをカバーする18チャンネルの設定が可能なので、在宅酸素処方からリザーバマスク処方まで、一台でさまざまな看護の現場に対応します。

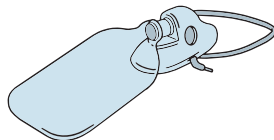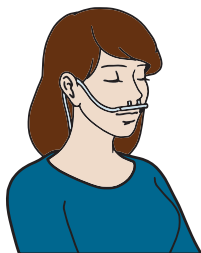

組み合わせ安心の出口圧0.34MPa。

出口圧は0.34MPa。高流量システムを含め、どの酸素療法器具でも組み合わせ使用可能です。恒圧式流量計と同様にお使い頂けます。

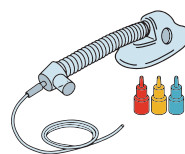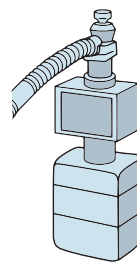

うっかりミスを防げる視流計。



流量なし

0.25L/min

15L/min

赤いボールで、酸素の流れが一目で確認できる視流計を内蔵。酸素が流れていないのに、流れていると勘違いしてしまうことを防ぎます。



寸法:11×94×φ57mm



院内アウトレット装着イメージ

流量設定目盛(L/min)																	
0	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15

製品名	品番	接続口形状	包装単位	用途	使用ガス	入口圧力	出口圧力	重量
フロージェントル アイハー	P-i8	川重タイプ	1個/箱	アウトレット バルブ	医療用酸素	0.41MPa	0.34MPa	430±10g
	P-i8A	アムコタイプ						

販売名：フロージェントル アイハー 医療機器認証番号：229AHBZX00031000 クラスII

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

販売元



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermed.jp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

大阪支店：TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

東京支店：TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

福岡支店：TEL092-451-2459・FAX092-451-2419

製造販売元

株式会社群馬コイケ

〒372-0855群馬県伊勢崎市長沼町222-1

■ お問い合わせは

- 本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
- 本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。