


# PAJUNK®



## 末梢神経ブロック

UniPlexII/ PlexoLong

相互接続防止コネクタ ISO 80369-6 対応

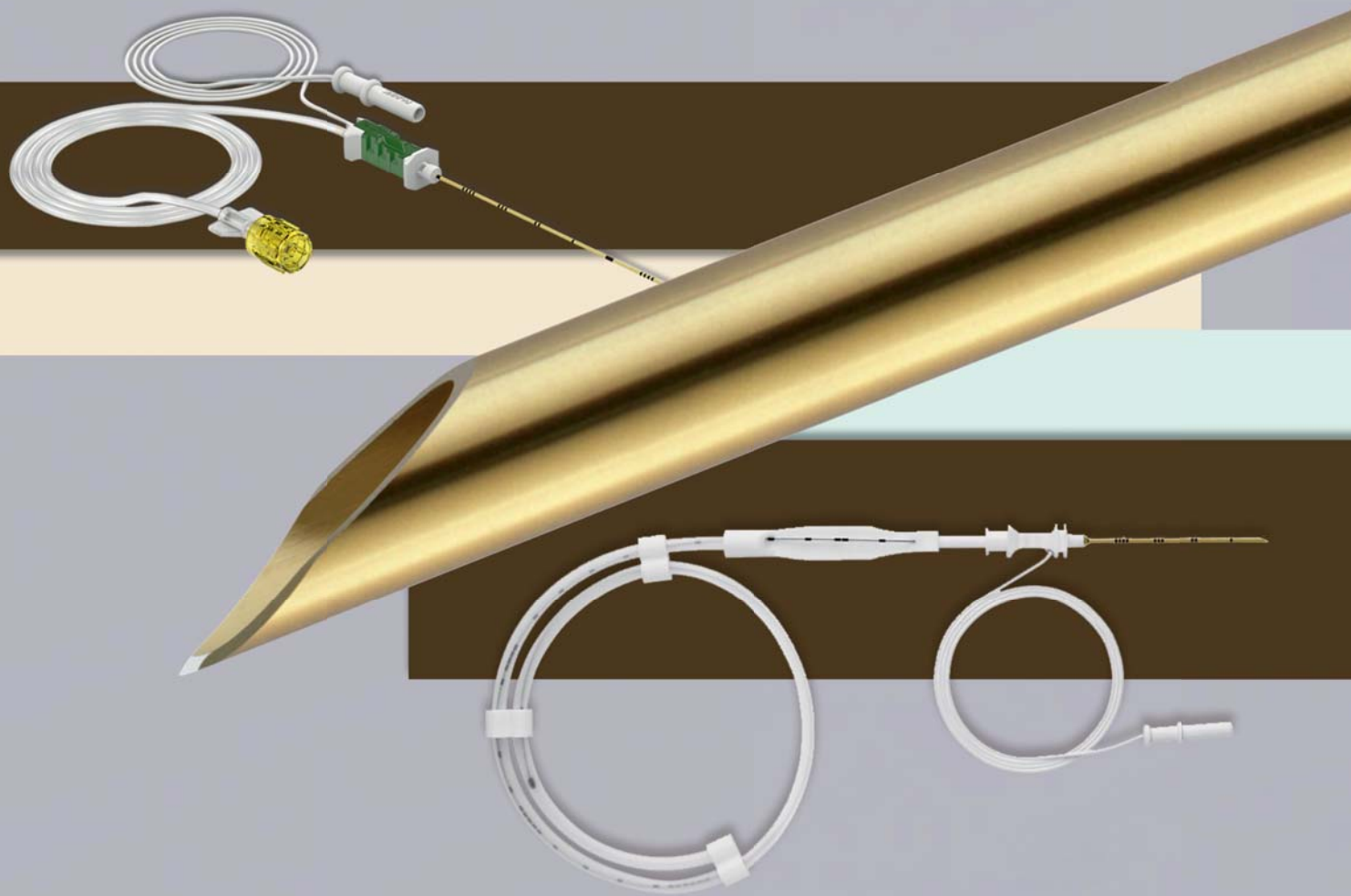

株式会社 インターメド ジャパン


MADE IN GERMANY 

# 単回麻酔用 末梢神経ブロック針

## UniPlex II

### ユニプレックスII

単回麻酔用のユニプレックスIIは、絶縁性のナノラインコーティングを施したファセットタイプの麻酔針です。専用の神経刺激装置「MultiStim センサー」に接続することで電気刺激によるアプローチが可能です。

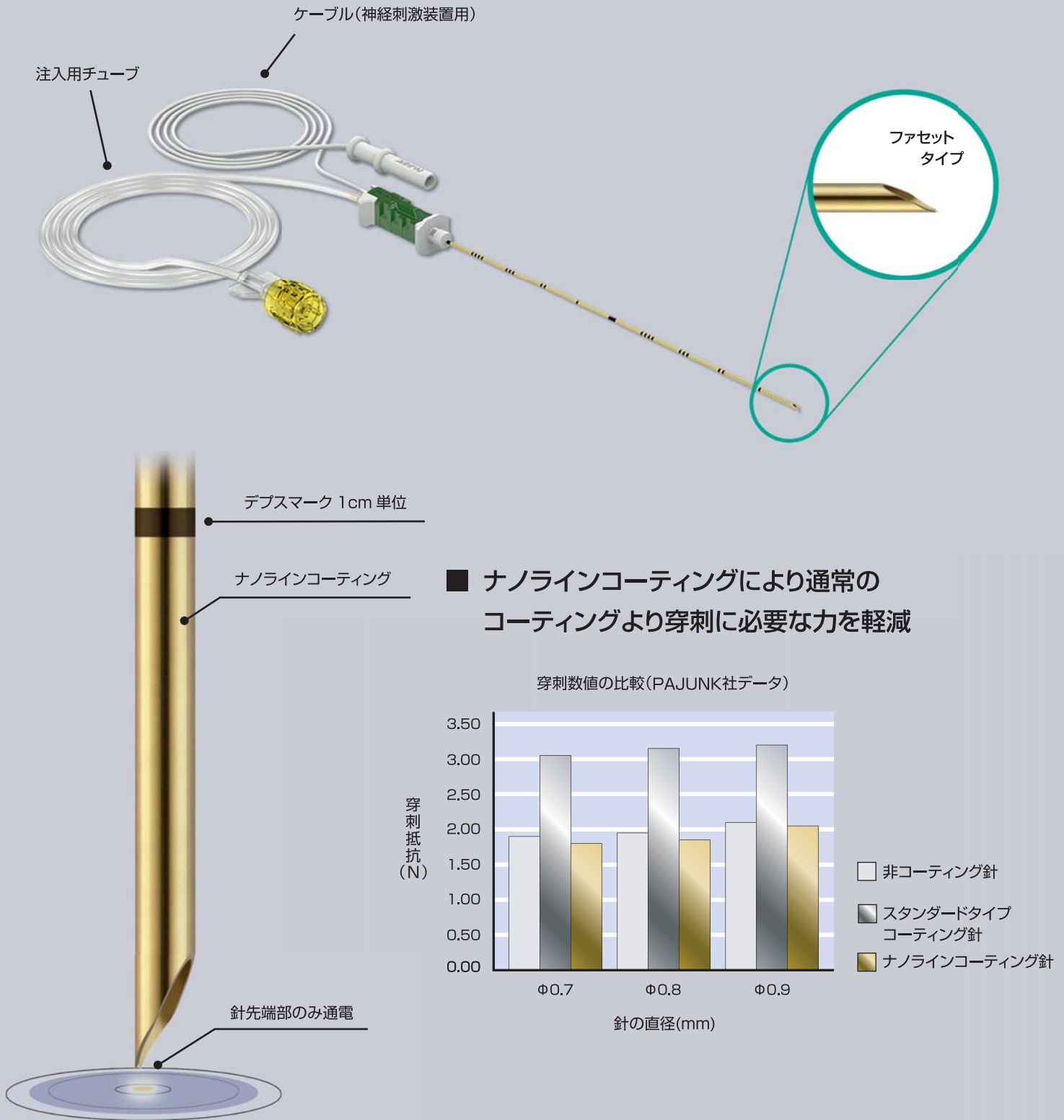

## 持続麻酔用 末梢神経ブロックセット

# PlexoLong

### プレクソロング

持続麻酔用のプレクソロングは、Dr.Meier と PAJUNK社が共同開発しました。絶縁性のナノラインコーティングを施した麻酔針は「チューイタイプ」と「ファセットタイプ」の2種類、カテーテルは「プレクソロングカテーテル」と「プレクソロングソノカテーテル」の2種類をご用意しています。専用の神経刺激装置「MultiStim センサー」に接続することで電気刺激によるアプローチが可能です。



#### 機能的なカテーテルシステム

プレクソロングカテーテル / プレクソロングソノカテーテルは保護ケースに入っているため、清潔な状態を保ちつつ穿刺針内を通すことができます。またカテーテルの留置位置を確認するため先端から5cmの位置より1cm単位でデプスマークが付いています。

#### セット内容



カテーテル



注入用チューブ



麻酔針  
(ファセットタイプ又はチューイタイプ)



フィルタ固定具  
(フィクソロング)



メス



フィルタ




アダプタ

### PlexoLongSono Cathter / プレクソロングソノカテーテル


#### キンク・折れ曲がり防止に優れた ステンレス製ヘリカルコイル

持続末梢神経ブロックをスムーズに実施するためには、患者が不適切な体位にあるとき、圧迫に耐えられるカテーテルでなければなりません。


プレクソロングソノカテーテルには、ステンレス製のヘリカルコイルが内蔵されており、キンクに強く長期の疼痛治療及び神経叢麻酔への使用に適しています。

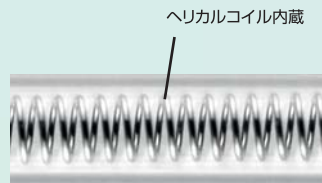

ヘリカルコイル内蔵

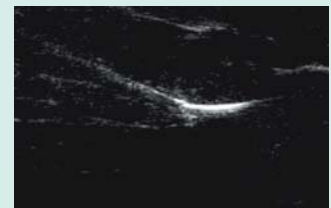

コイルは超音波検出が可能です。

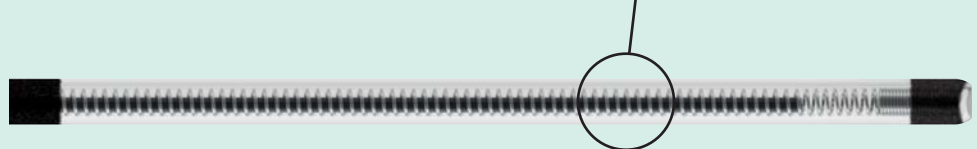

**別売**

**フィクソキャス**

ドレッシングテープと固定具を組み合わせ、カテーテルの留置部に直接装着します。



**別売**

**MultiStim センサー**

PAJUNK は穿刺キットに加え、神経叢の位置を特定するための神経刺激装置をご用意しています。



メインケーブル SE/SW



PEG ハンドル



メインケーブル SE

■ ユニブックスII 単回麻酔用 末梢神経ブロック針

製品名	製品番号	規格	包装単位
ユニブックスII	001246-74	22G×50mm	10本/箱
	001246-77	21G×100mm	

販売名:パユンク 神経ブロック針 医療機器承認番号:22200BZX00905000 クラスII

■ ブレクソロング 持続麻酔用 末梢神経ブロックセット

製品名	製品番号	規格(針)	規格(カテーテル)	包装単位
ブレクソロングナノライン ファセット	531166-31A	19G×50mm	20G×50cm	10セット/箱
	521166-31A	19G×100mm		
ブレクソロングナノライン テューイ	531166-31C	18G×50mm		
	521166-31C	18G×100mm		
	511166-31C	18G×150mm		
ブレクソロングソノナノライン ファセット	531167-31A	19G×50mm		
ブレクソロングソノナノライン テューイ	531167-31C	18G×50mm		

販売名:パユンク麻酔用カテーテルキット 医療機器承認番号:22500BZX00530000 クラスII

■ 別売

製品名	製品番号	規格	包装単位	薬事番号
フィクソキャス	001151-37Z	滅菌済	10枚/箱	※1
MultiStim センサー SE/SW	1151-94-30	PEGハンドルなし	1セット/箱	※2
MultiStim センサー SE	1151-94-32	PEGハンドル付		
メインケーブル SE/SW用	1151-94-13	—	1本/箱	※3
メインケーブル SE用	1151-94-14	—		
PEGハンドル	1151-94-17	—		
延長ケーブル	01151-861F	40cm		

※1 販売名:カテーテル用パッチFixoCath 医療機器届出番号:27B1X00040000143 クラスI

※2 販売名:パユンク MultiStim 医療機器承認番号:22300BZX00070000 クラスII

※3 法第二条第四項適用外

製造販売元

代理店

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

販売元

**株式会社 インターメド ジャパン**

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階  
TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店:TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店:TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店:TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419



P302726-2112-02-800-11

●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。  
●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。  
●商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。