

PAJUNK®




REGIONAL ANAESTHESIA
& PAIN MANAGEMENT

スプロッテ脊椎麻酔針

SPROTTE® *Needles for Atraumatic
Spinal Anaesthesia*

相互接続防止コネクタ ISO 80369-6 対応

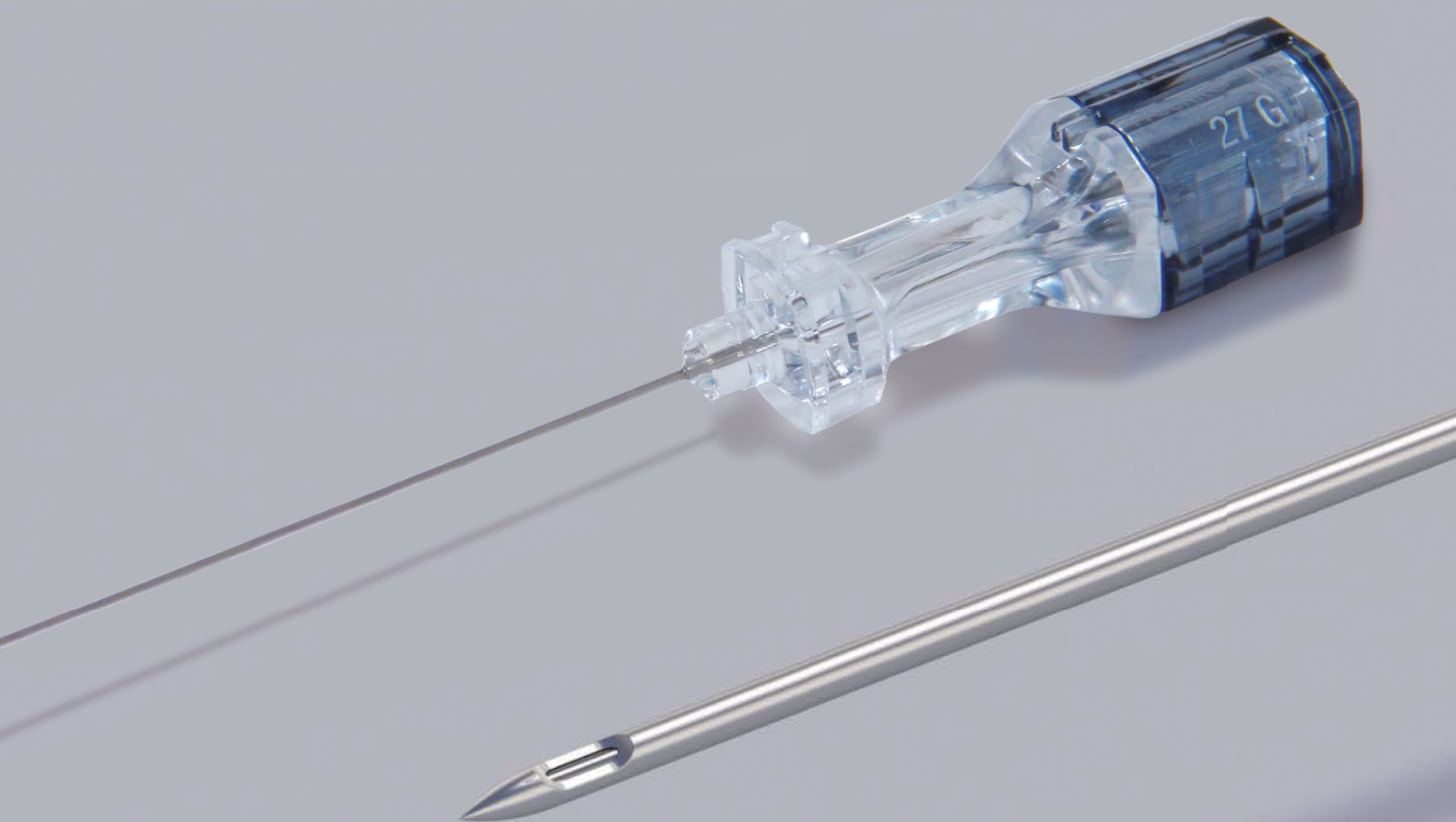


株式会社 インターメド ジャパン

MADE IN GERMANY 

SPROTTE®

Needles for Atraumatic Spinal Anaesthesia



脊椎くも膜下麻酔では、細い麻酔針を使用し Non cutting タイプの針先を選択することで脳脊髄液 (CSF) の漏出が抑えられ、PDPH (硬膜穿刺後頭痛) の発生率が低いと言われています。¹ スプロッテ脊椎麻酔針は、24G から 27G のサイズ展開と独自の先端形状により PDPH の低減に貢献します。²

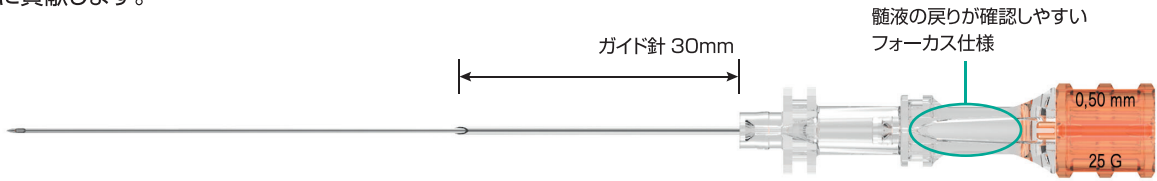

■ ISO80369-6 対応コネクタ採用

より先端により広く設計した開口部形状

- ・ 広い開口部は CSF のスムーズなフラッシュバックを可能にします。²
- ・ バリがなく丸みを帯びた開口部のエッジによりスムーズな刺入が期待できます。

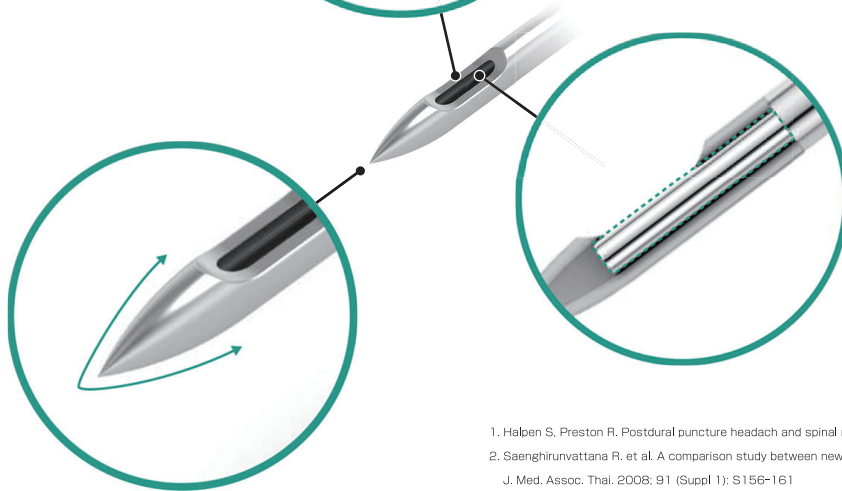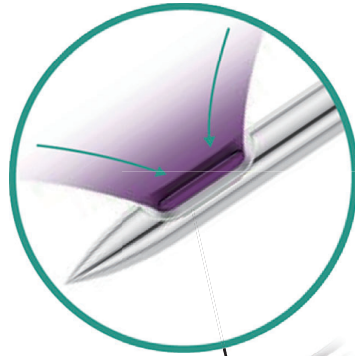

研磨加工済みスタイレット

感染源となる針内腔への皮下組織の持ち込みを防ぐため、スタイレットは麻酔針内腔と密着するように設計されています。³

ペンシルポイントタイプの針先形状

- ・ 硬膜繊維を押し広げるように刺入するため穿孔孔を早く閉塞させ CSF 流出を抑制します。⁴
- ・ 鈍的な先端により硬膜を貫通する感覚をフィードバックします。

1. Halpen S, Preston R. Postdural puncture headache and spinal needle design. *Anesthesiology* 1994;81:1376-83.
2. Saenghirunvattana R, et al. A comparison study between newly-designed pencil-point and cutting needles in spinal anaesthesia. *J. Med. Assoc. Thai.* 2008; 91 (Suppl 1): S156-161
3. Armon C, Evans R. W. Addendum to assessment: Prevention of postlumbar puncture headaches Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology.* 2005; 65: 510
4. Cesarini, M. et al. Sprotte needle for intrathecal anaesthesia for Caesarean section: incidence of postdural puncture headache. *Aaesthesia* 1990; 45: 646-658

| 製品名 | 製品番号 | 規格 | 包装単位 |
|------------------|------------|----------|-------|
| スプロッテ脊椎麻酔針 ガイド針付 | 121163-30A | 24G×90mm | 25本/箱 |
| スプロッテ脊椎麻酔針 ガイド針付 | 021163-29A | 25G×90mm | 25本/箱 |
| スプロッテ脊椎麻酔針 ガイド針付 | 021163-27A | 27G×90mm | 25本/箱 |

販売名:スプロッテ脊椎麻酔針 医療機器承認番号:20400BZY00413000 クラスⅢ

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

販売元

代理店

IMJ 株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店: TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店: TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店: TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419

P292725-2201-01-500-6

- 本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
- 本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- 商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。