

# 酸素療法関連器具 総合カタログ



## アクアプライムネブライザーシステム

### シンプルな操作性と様々な安全機能を備えた ネブライザーシステム

#### ワンタッチ操作

アダプタとボトルの着脱が  
ワンタッチで簡単に行えます



セッティング  
動画

#### ソフトバッグボトル

アクアプライムネブライザーは  
ソフトバッグボトルのため  
使用後の廃棄量を削減できます

#### ヒータ本体に 水切れアラーム搭載

ネブライザーボトルの水切れを検出し  
アラームでお知らせします

#### 加温加湿しながら ボトル交換

独自構造のネブライザーアダプタにより  
加温加湿を継続しながら  
ボトルの交換ができます



## アクアプライムネブライザーヒータ Aquaprime Nebulizer Heater

- ヒータに内蔵された温度センサによりネブライザ出口温度が一定になるようにコントロール
- ネブライザーボトル水の水切れを検出<sup>(1)</sup>
- 各種 LED によりヒータの動作状況を表示
- 水切れ、ヒータ異常高温、ネブライザ出口異常高温などのアラームを搭載
- 防水仕様 (IPX2)

(1) 全ての環境下での水切れ防止を保証するものではありません。

#### 電气的特性・寸法

定格電圧	100VAC 50/60Hz
消費電力	120W
外形	60mm(高さ)×100mm(幅)×120mm(奥行)
重量	500g
電源コード	1.8m
耐用年数	納入後 6年間
保証期間	納入後 1年間



## アクアプライムネブライザボトル

### Aquaprime Nebulizer Bottle



- 容量800mL
- ソフトバッグにより使用後の廃棄量を削減
- ワンタッチでネブライザアダプタとの着脱が可能



## アクアプライムネブライザアダプタ

### Aquaprime Nebulizer Adapter



- ワンタッチでネブライザボトルの着脱が可能
- リターンチューブレスでボトル内へ水が戻らない仕組み
- 独自の構造により加温加湿しながらボトル交換可能

【ボトルの取り外し方】



【ボトル水消費時間】※ 酸素流量8L/分 室温26℃

ボトル使用時間(h) ※自社測定試験

酸素濃度(%)	温度設定9	温度設定5	温度設定1	コールド
31	6.9	6.8	8.8	21.3
35	7.3	8.2	10.7	28.0
40	7.5	10.4	12.8	29.8
50	11.6	13.7	16.9	33.5
60	13.1	14.8	20.6	48.1
80	17.7	20.4	26.8	64.7
98	20.6	24.4	31.3	81.5

品番	品名	規格	包装単位	薬事番号
AP001	アクアプライムネブライザヒータ		1台/箱	※1
AP002	アクアプライムネブライザボトル	800mL	10本/箱	※2
AP003	アクアプライムネブライザアダプタ		10個/箱	※3

※1 一般的名称：加熱式ネブライザ 販売名：Aquaprimeネブライザ温度センサ付ヒータ  
医療機器届出番号：27B1X00002000029 クラスI

※2 一般的名称：酸素吸入加温加湿装置用水 販売名：Aquaprimeネブライザボトル  
医療機器認証番号：301AFBZX00058000 クラスII

※3 一般的名称：非加熱式ネブライザ 販売名：Aquaprimeネブライザアダプタ  
医療機器届出番号：27B1X00002000028 クラスI

## アクアプライム ヒューミディファイアー



酸素流量設定 (L/min)		1	2	3	4	5
連続使用時間 (h)	アクアプライム350 (350mL)	333	180	134	111	88
	アクアプライム550 (550mL)	474	264	193	156	127

※条件により多少の誤差が生じます。

品番	品名	規格	包装単位
0350	アクアプライム350	350mL	20セット/箱
0550	アクアプライム550	550mL	12セット/箱

一般的名称：酸素吸入加温加湿装置用水 販売名：Aquaprime ヒューミディファイアー  
医療機器認証番号：226AFBZX00139000 クラスII

- ボトルの充填容量は、経済的な350mLと、長時間加湿用の550mLの2種類があります。
- 推奨最大酸素流量は12L/minです。
- 本システムには、アラーム機能があり、チューブのキンクなどで内圧が35kPa以上になると作動します。



## 中濃度酸素マスク



品番	品名	規格	包装単位
330122	中濃度酸素マスク	大人用 グリーン	10個/箱
330123	中濃度酸素マスク	小児用 グリーン	
330132	中濃度酸素マスク	大人用 クリア	
330133	中濃度酸素マスク	小児用 クリア	

一般的名称：空気・酸素マスク 販売名：Hライン 酸素マスク  
医療機器認証番号：224ADBZX00303000 クラスII

## 酸素カニューラ



品番	品名	規格	包装単位
330302	酸素カニューラ	大人用	25本/箱
330303	酸素カニューラ	小児用	
330304	酸素カニューラ	乳幼児用	

一般的名称：酸素供給用経鼻カニューレ 販売名：Hライン 酸素カニューラ  
医療機器認証番号：224ADBZX00297000 クラスII

## 気管切開マスク



品番	品名	規格	包装単位
330160	気管切開マスク	大人用	10個/箱
330161	気管切開マスク	小児用	

一般的名称：エアロゾル気管切開用マスク 販売名：Hライン 気管切開用エアゾールマスク  
医療機器認証番号：224ADBZX00298000 クラスII

## セレクトベントマスク・セレクトベント気管切開マスク



品番	品名	規格	包装単位
330144	セレクトベントマスク	大人用 グリーン	10個/箱
330154	セレクトベントマスク	大人用 クリア	
330155	セレクトベントマスク	小児用 クリア	

一般的名称：ベンチュリマスク 販売名：Hライン セレクトベントマスク  
医療機器認証番号：224ADBZX00301000 クラスII

## 非再呼吸マスク



品番	品名	規格	包装単位
330124	非再呼吸マスク	大人用 グリーン	10個/箱
330125	非再呼吸マスク	小児用 グリーン	
330134	非再呼吸マスク	大人用 クリア	
330135	非再呼吸マスク	小児用 クリア	

一般的名称：空気・酸素非再呼吸式マスク 販売名：Hライン 非再呼吸式酸素マスク  
医療機器認証番号：224ADBZX00302000 クラスII

## エアゾールマスク



品番	品名	規格	包装単位
330140	エアゾールマスク	大人用 グリーン	10個/箱
330141	エアゾールマスク	小児用 グリーン	
330150	エアゾールマスク	大人用 クリア	
330151	エアゾールマスク	小児用 クリア	

一般的名称：空気・酸素マスク 販売名：Hライン エアゾールマスク  
医療機器認証番号：224ADBZX00304000 クラスII

## マルチベントマスク



品番	品名	規格	包装単位
330147	マルチベントマスク	大人用 グリーン	10個/箱
330156	マルチベントマスク	小児用 クリア	
330157	マルチベントマスク	大人用 クリア	

一般的名称：ベンチュリマスク 販売名：Hライン マルチベントマスク  
医療機器認証番号：224ADBZX00300000 クラスII

カラーコード	酸素濃度
ブルー	24%
イエロー	28%
ホワイト	31%
グリーン	35%
レッド	40%
オレンジ	50%


●カラーコードで分類した6種類の酸素希釈器で、24% 28% 31% 35% 40% 50%の酸素濃度が選べます。

●ネプライザー用コネクタ、酸素チューブ付です。

品番	品名	規格	包装単位
330166	セレクトベント気管切開マスク	大人用	10個/箱

一般的名称：エアロゾル気管切開用マスク 販売名：Hライン 気管切開用セレクトベントマスク  
医療機器認証番号：224ADBZX00299000 クラスII

## ネブライザーシステム

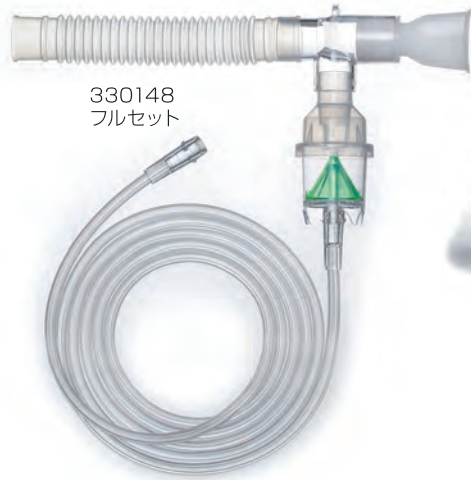

330148  
フルセット



330158  
Tコネクタ マウスピース付



330500  
本体(6cc)

- MMAD1.2 $\mu$ m
- 90°まで傾けても作動します。
- 推奨酸素流量は8LPMです。
- 容量は6ccです。

品番	品名	規格	包装単位
330500	ネブライザーボトル	本体 (6cc)	10個/箱
330158	ネブライザーシステム	Tコネクタマウスピース付	10セット/箱
330148	ネブライザーシステム	フルセット	

一般的名称：酸素投与キット 販売名：Hライン ネブライザーキット  
医療機器認証番号：226ADBZX00136000 クラスII

## 蛇管 ロールタイプ・カットタイプ



- チューブ両端接続部内径は22mmです。
- 15cmごとに節があり、カットしてご使用になれます。
- 豊富な長さを揃えており、ご希望のサイズをお選びいただけます。

品番	品名	規格	包装単位
370229	蛇管 ロールタイプ	30m巻	1巻/箱
370201	蛇管 カットタイプ	15cm	10本/箱
370202	蛇管 カットタイプ	75cm	5本/箱
370281	蛇管 カットタイプ	105cm	
370203	蛇管 カットタイプ	120cm	
370204	蛇管 カットタイプ	150cm	
370205	蛇管 カットタイプ	180cm	

一般的名称：エアロゾル注入チューブ 販売名：Hライン 蛇管  
医療機器認証番号：225ADBZX00033000 クラスII

## ドレーンバッグ



- Yアダプタ付(外径22mm)
- バッグ容量 750mL

品番	品名	規格	包装単位
370561	ドレーンバッグ		10個/箱

一般的名称：単回使用汎用ウォータトラップ 販売名：ドレーンバッグ  
医療機器届出番号：27B1X00002000030 クラスI

## 酸素チューブ



330300



330201

品番	品名	規格	包装単位
330200	酸素チューブ	200cm グリーン	25本/箱
330300	酸素チューブ	200cm クリア	
330201	酸素チューブ ユニバーサルタイプ	200cm グリーン	
330301	酸素チューブ ユニバーサルタイプ	200cm クリア	

一般的名称：呼吸回路用ガス供給用チューブ 販売名：Hライン 酸素チューブ  
医療機器認証番号：225ADBZX00018000 クラスII

## ニップルナット




品番	品名	規格	包装単位
330018	ニップルナット		25個/箱

一般的名称：呼吸回路用ガス供給用チューブ 販売名：Hライン 酸素チューブ  
医療機器認証番号：225ADBZX00018000 クラスII

# Flowmeter

## セフティフロー酸素流量計

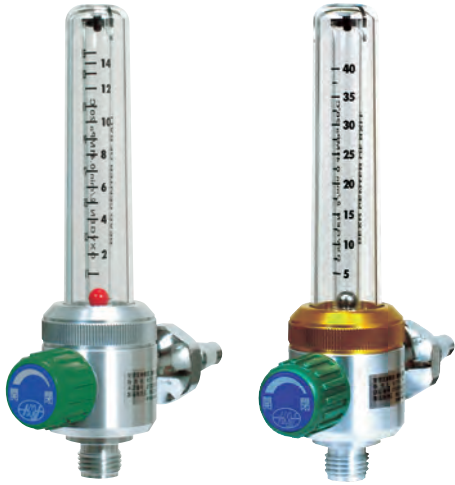

品番	流量調整範囲	接続口形状	入口圧力	包装単位
P-311KG	1~15LPM	川重タイプ	0.41MPa	1個/箱
P-311AG		アムコタイプ		
P-317K	5~40LPM	川重タイプ		
P-317A		アムコタイプ		

一般的名称：酸素治療フローメータ 販売名：セフティフロー  
 医療機器認証番号：21000BZZ00016000 クラスII  
 製造販売元：株式会社 群馬コイケ

## パイピング用酸素流量計(ダイヤル式)

### 酸素流量計 Flow Gentle i8 フロージェントルアイハー



流量設定目盛 (L/min)																	
0	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15

品番	流量調整範囲	接続口形状	入口圧力	包装単位
P-i8	0~15LPM	川重タイプ	0.41MPa	1個/箱
P-i8A		アムコタイプ*		

一般的名称：酸素治療フローメータ 販売名：フロージェントル アイハー  
 医療機器認証番号：229AHBZX00031000 クラスII  
 製造販売元：株式会社 群馬コイケ  
 ※アムコタイプは受注発注製品です。

## バルブ付ポンベ用酸素流量計(ネジ式・ヨーク式)



品番		流量設定目盛 (L/min)																		
ネジ式	ヨーク式	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	12	15
FG4-L	Y-4L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	12	15
FG10-L	Y-10L	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15					
FG15-L	Y-15L	0	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15							

品番	流量調整範囲	接続口形状	出口圧力	包装単位	薬事番号
FG4-L	0 ~ 4LPM	ネジ式	0.14MPa以下	1個/箱	※1
FG10-L	0~10LPM				
FG15-L	0~15LPM				
Y-4L	0 ~ 4LPM	ヨーク式	0.14MPa以下	1個/箱	※2
Y-10L	0~10LPM				
Y-15L	0~15LPM				

※1 一般的名称：高圧ガスレギュレータ 販売名：フロージェントル プラス G形  
 医療機器届出番号：10B2X00014B00001 クラスI 製造販売元：株式会社 群馬コイケ

※2 一般的名称：高圧ガスレギュレータ 販売名：フロージェントル プラス Y形  
 医療機器届出番号：10B2X00014B00002 クラスI 製造販売元：株式会社 群馬コイケ

代理店

## フロート式空気流量計



品番	流量調整範囲	接続口形状	入口圧力	包装単位
P-311K-AIR	0~15LPM	川重タイプ	0.41MPa	1個/箱
P-311A-AIR		アムコタイプ*		

法第二条第四項適用外 製造元：株式会社 群馬コイケ  
 ※アムコタイプは受注発注製品です。

製造販売元

**IMJ 株式会社インターメド ジャパン**  
<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪府中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F  
 TEL 06-6222-1951(代) FAX 06-6222-1950

東京支店：TEL 03-5363-8460 FAX 03-5363-8465

大阪支店：TEL 06-6222-1957 FAX 06-6222-3760

福岡支店：TEL 092-451-2459 FAX 092-451-2419



●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。  
 ●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧下さい。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。  
 ●商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。