

酸素療法関連器具 総合力タログ



中濃度酸素マスク



| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|----------|----------|-------|
| 330122 | 中濃度酸素マスク | 大人用 グリーン | 10個/箱 |
| 330123 | 中濃度酸素マスク | 小児用 グリーン | |
| 330132 | 中濃度酸素マスク | 大人用 クリア | |
| 330133 | 中濃度酸素マスク | 小児用 クリア | |

一般的名称：空気・酸素マスク 販売名：Hライン 酸素マスク
医療機器認証番号：224ADBZX00303000 クラスⅡ

酸素カニューラ



| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|---------|------|-------|
| 330302 | 酸素カニューラ | 大人用 | 25本/箱 |
| 330303 | 酸素カニューラ | 小児用 | |
| 330304 | 酸素カニューラ | 乳幼児用 | |

一般的名称：酸素供給用経鼻カニューレ 販売名：Hライン 酸素カニューラ
医療機器認証番号：224ADBZX00297000 クラスⅡ

気管切開マスク



| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|---------|-----|-------|
| 330160 | 気管切開マスク | 大人用 | 10個/箱 |
| 330161 | 気管切開マスク | 小児用 | |

一般的名称：エアロゾル気管切開用マスク 販売名：Hライン 気管切開用エアゾールマスク
医療機器認証番号：224ADBZX00298000 クラスⅡ

セレクトベントマスク・セレクトベント気管切開マスク



| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|------------|----------|-------|
| 330144 | セレクトベントマスク | 大人用 グリーン | 10個/箱 |
| 330154 | セレクトベントマスク | 大人用 クリア | |
| 330155 | セレクトベントマスク | 小児用 クリア | |

一般的名称：ベンチュリマスク 販売名：Hライン セレクトベントマスク
医療機器認証番号：224ADBZX00301000 クラスⅡ

非再呼吸マスク



| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|---------|----------|-------|
| 330124 | 非再呼吸マスク | 大人用 グリーン | 10個/箱 |
| 330125 | 非再呼吸マスク | 小児用 グリーン | |
| 330134 | 非再呼吸マスク | 大人用 クリア | |
| 330135 | 非再呼吸マスク | 小児用 クリア | |

一般的名称：空気・酸素非再呼吸式マスク 販売名：Hライン 非再呼吸式酸素マスク
医療機器認証番号：224ADBZX00302000 クラスⅡ

エアゾールマスク



| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|----------|----------|-------|
| 330140 | エアゾールマスク | 大人用 グリーン | 10個/箱 |
| 330141 | エアゾールマスク | 小児用 グリーン | |
| 330150 | エアゾールマスク | 大人用 クリア | |
| 330151 | エアゾールマスク | 小児用 クリア | |

一般的名称：空気・酸素マスク 販売名：Hライン エアゾールマスク
医療機器認証番号：224ADBZX00304000 クラスⅡ

マルチベントマスク



| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|-----------|----------|-------|
| 330147 | マルチベントマスク | 大人用 グリーン | 10個/箱 |
| 330157 | マルチベントマスク | 大人用 クリア | |
| 330156 | マルチベントマスク | 小児用 クリア | |

一般的名称：ベンチュリマスク 販売名：Hライン マルチベントマスク
医療機器認証番号：224ADBZX00300000 クラスⅡ



330166


- カラーコードで分類した6種類の酸素希釈器で、24% 28% 31% 35% 40% 50%の酸素濃度が選べます。
- ネプライザー用コネクタ、酸素チューブ付です。

| カラーコード | 酸素濃度 |
|--------|------|
| ブルー | 24% |
| イエロー | 28% |
| ホワイト | 31% |
| グリーン | 35% |
| レッド | 40% |
| オレンジ | 50% |

| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|----------------|-----|-------|
| 330166 | セレクトベント気管切開マスク | 大人用 | 10個/箱 |

一般的名称：エアロゾル気管切開用マスク 販売名：Hライン 気管切開用セレクトベントマスク
医療機器認証番号：224ADBZX00299000 クラスⅡ

ネブライザーシステム

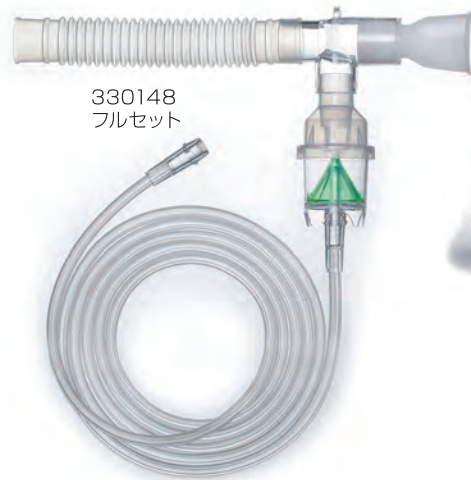

330148
フルセット



330158
Tコネクタ マウスピース付



330500
本体 (6cc)

- MMAD1.2 μ m
- 90°まで傾けても作動します。
- 推奨酸素流量は8LPMです。
- 容量は6ccです。

| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|------------|--------------|---------|
| 330500 | ネブライザーボトル | 本体 (6cc) | 10個/箱 |
| 330158 | ネブライザーシステム | Tコネクタマウスピース付 | 10セット/箱 |
| 330148 | ネブライザーシステム | フルセット | |

一般の名称：酸素投与キット 販売名：Hライン ネブライザーキット
医療機器認証番号：226ADBZX00136000 クラスII

蛇管 ロールタイプ・カットタイプ



370229

- チューブ両端接続部内径は22mmです。
- 15cmごとに節があり、カットしてご使用になれます。
- 豊富な長さを揃えており、ご希望のサイズをお選びいただけます。

| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|-----------|-------|-------|
| 370229 | 蛇管 ロールタイプ | 30m巻 | 1巻/箱 |
| 370201 | 蛇管 カットタイプ | 15cm | 10本/箱 |
| 370202 | 蛇管 カットタイプ | 75cm | 5本/箱 |
| 370281 | 蛇管 カットタイプ | 105cm | |
| 370203 | 蛇管 カットタイプ | 120cm | |
| 370204 | 蛇管 カットタイプ | 150cm | |
| 370205 | 蛇管 カットタイプ | 180cm | |

一般の名称：エアゾル注入チューブ 販売名：Hライン 蛇管
医療機器認証番号：225ADBZX00033000 クラスII

ドレーンバッグ



- Yアダプタ付(外径22mm)
- バッグ容量 750mL

| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|---------|----|-------|
| 370561 | ドレーンバッグ | | 10個/箱 |

一般の名称：単回使用汎用ウォータトラップ 販売名：ドレーンバッグ
医療機器届出番号：27B1X00002000030 クラスI

酸素チューブ



330300



330201

| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|------------------|------------|-------|
| 330200 | 酸素チューブ | 200cm グリーン | 25本/箱 |
| 330300 | 酸素チューブ | 200cm クリア | |
| 330201 | 酸素チューブ ユニバーサルタイプ | 200cm グリーン | |
| 330301 | 酸素チューブ ユニバーサルタイプ | 200cm クリア | |
| | | | |

一般の名称：呼吸回路用ガス供給用チューブ 販売名：Hライン 酸素チューブ
医療機器認証番号：225ADBZX00018000 クラスII

ニップルナット



| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|--------|---------|----|-------|
| 330018 | ニップルナット | | 25個/箱 |

一般の名称：呼吸回路用ガス供給用チューブ 販売名：Hライン 酸素チューブ
医療機器認証番号：225ADBZX00018000 クラスII

アクアプライムネブライザーシステム

シンプルな操作性と様々な安全機能を備えた ネブライザーシステム

ワンタッチ操作

アダプタとボトルの着脱が
ワンタッチで簡単に行えます



セッティング
動画

ヒータ本体に 水切れアラーム搭載

ネブライザボトルの水切れを検出し
アラームでお知らせします



ソフトバッグボトル

アクアプライムネブライザボトルは
ソフトバッグボトルのため
使用後の廃棄量を削減できます

加温加湿しながら ボトル交換

独自構造のネブライザアダプタにより
加温加湿を継続しながら
ボトルの交換ができます

アクアプライムネブライザヒータ Aquaprime Nebulizer Heater

- ヒータに内蔵された温度センサによりネブライザ出口温度が一定になるようにコントロール
- ネブライザボトル水の水切れを検出⁽¹⁾
- 各種 LED によりヒータの動作状況を表示
- 水切れ、ヒータ異常高温、ネブライザ出口異常高温などのアラームを搭載
- 防水仕様 (IPX2)

(1) 全ての環境下での水切れ防止を保証するものではありません。

電气的特性・寸法

| | |
|-------|------------------------------------|
| 定格電圧 | 100VAC 50/60Hz |
| 消費電力 | 120W |
| 外形 | 60mm (高さ) × 100mm (幅) × 120mm (奥行) |
| 重量 | 500g |
| 電源コード | 1.8m |
| 耐用年数 | 納入後 6年間 |
| 保証期間 | 納入後 1年間 |



アクアプライムネブライザボトル

Aquaprime Nebulizer Bottle



- 容量800mL
- ソフトバッグにより使用後の廃棄量を削減
- ワンタッチでネブライザアダプタの着脱が可能



アクアプライムネブライザアダプタ

Aquaprime Nebulizer Adapter



- ワンタッチでネブライザボトルの着脱が可能
- リターンチューブレスでボトル内へ水が戻らない仕組み
- 独自の構造により加温加湿しながらボトル交換可能

【ボトルの取り外し方】



【ボトル水消費時間】※ 酸素流量8L/分 室温26℃

ボトル使用時間(h)

※自社測定試験

| 酸素濃度 (%) | 温度設定9 | 温度設定5 | 温度設定1 | コールド |
|----------|-------|-------|-------|------|
| 31 | 6.9 | 6.8 | 8.8 | 21.3 |
| 35 | 7.3 | 8.2 | 10.7 | 28.0 |
| 40 | 7.5 | 10.4 | 12.8 | 29.8 |
| 50 | 11.6 | 13.7 | 16.9 | 33.5 |
| 60 | 13.1 | 14.8 | 20.6 | 48.1 |
| 80 | 17.7 | 20.4 | 26.8 | 64.7 |
| 98 | 20.6 | 24.4 | 31.3 | 81.5 |

| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 | 薬事番号 |
|-------|------------------|-------|-------|------|
| AP001 | アクアプライムネブライザヒータ | | 1台/箱 | ※1 |
| AP002 | アクアプライムネブライザボトル | 800mL | 10本/箱 | ※2 |
| AP003 | アクアプライムネブライザアダプタ | | 10個/箱 | ※3 |

※1 一般的名称：加熱式ネブライザ 販売名：Aquaprimeネブライザ温度センサ付ヒータ
医療機器届出番号：27B1X00002000029 クラスⅠ

※2 一般的名称：酸素吸入加温加湿装置用水 販売名：Aquaprimeネブライザボトル
医療機器認証番号：301AFBZX00058000 クラスⅡ

※3 一般的名称：非加熱式ネブライザ 販売名：Aquaprimeネブライザアダプタ
医療機器届出番号：27B1X00002000028 クラスⅠ

アクアプライム ヒューミディファイアー



| 酸素流量設定 (L/min) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 連続使用時間 (h) | アクアプライム350 (350mL) | 333 | 180 | 134 | 111 | 88 |
| | アクアプライム550 (550mL) | 474 | 264 | 193 | 156 | 127 |

※条件により多少の誤差が生じます。

| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|------|------------|-------|---------|
| 0350 | アクアプライム350 | 350mL | 20セット/箱 |
| 0550 | アクアプライム550 | 550mL | 12セット/箱 |

一般的名称：酸素吸入加温加湿装置用水 販売名：Aquaprime ヒューミディファイアー
医療機器認証番号：226AFBZX00139000 クラスⅡ

- ボトルの充填容量は、経済的な350mLと、長時間加湿用の550mLの2種類があります。
- 推奨最大酸素流量は12L/minです。
- 本システムには、アラーム機能があり、チューブのキンクなどで内圧が35kPa以上になると作動します。

Flowmeter

セフティフロー酸素流量計



| 品番 | 流量調整範囲 | 接続口形状 | 入口圧力 | 包装単位 |
|---------|---------|--------|---------|------|
| P-311KG | 1～15LPM | 川重タイプ | 0.41MPa | 1個/箱 |
| P-311AG | | アムコタイプ | | |
| P-317K | 5～40LPM | 川重タイプ | | |
| P-317A | | アムコタイプ | | |

一般的名称：酸素治療フローメータ 販売名：セフティフロー
 医療機器認証番号：21000BZZ00016000 クラスⅡ
 製造販売元：株式会社 群馬コイケ

フロート式空気流量計



| 品番 | 流量調整範囲 | 接続口形状 | 入口圧力 | 包装単位 |
|------------|---------|---------|---------|------|
| P-311K-AIR | 0～15LPM | 川重タイプ | 0.41MPa | 1個/箱 |
| P-311A-AIR | | アムコタイプ※ | | |

法第二条第四項適用外 製造元：株式会社 群馬コイケ
 ※アムコタイプは受注発注製品です。

製造販売元



株式会社インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
 TEL 06-6222-1951(代) FAX 06-6222-1950

東京支店：TEL 03-5363-8460 FAX 03-5363-8465

大阪支店：TEL 06-6222-1957 FAX 06-6222-3760

福岡支店：TEL 092-451-2459 FAX 092-451-2419



●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
 ●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧下さい。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
 ●商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。

パイピング用酸素流量計(ダイヤル式)

酸素流量計

Flow Gentle i8
 フロージェントルアイハー



| 流量設定目盛 (L/min) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 品番 | 流量調整範囲 | 接続口形状 | 入口圧力 | 包装単位 |
|-------|---------|---------|---------|------|
| P-i8 | 0～15LPM | 川重タイプ | 0.41MPa | 1個/箱 |
| P-i8A | | アムコタイプ※ | | |

一般的名称：酸素治療フローメータ 販売名：フロージェントル アイハー
 医療機器認証番号：229AHBZX00031000 クラスⅡ
 製造販売元：株式会社 群馬コイケ
 ※アムコタイプは受注発注製品です。

バルブ付ボンベ用酸素流量計(ネジ式・ヨーク式)



| 品番 | | 流量設定目盛 (L/min) | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----------------|------|-----|------|---|------|-----|------|---|-----|----|----|
| ネジ式 | ヨーク式 | | | | | | | | | | | | |
| FG4-L | Y-4L | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| FG10-L | Y-10L | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| FG15-L | Y-15L | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 |

| 品番 | 流量調整範囲 | 接続口形状 | 出口圧力 | 包装単位 | 薬事番号 |
|--------|---------|-------|-----------|------|------|
| FG4-L | 0～4LPM | ネジ式 | 0.14MPa以下 | 1個/箱 | ※1 |
| FG10-L | 0～10LPM | | | | |
| FG15-L | 0～15LPM | | | | |
| Y-4L | 0～4LPM | ヨーク式※ | 0.14MPa以下 | 1個/箱 | ※2 |
| Y-10L | 0～10LPM | | | | |
| Y-15L | 0～15LPM | | | | |

※1 一般的名称：高圧ガスレギュレータ 販売名：フロージェントル プラス G形
 医療機器届出番号：10B2X00014B00001 クラスⅠ 製造販売元：株式会社 群馬コイケ

※2 一般的名称：高圧ガスレギュレータ 販売名：フロージェントル プラス Y形
 医療機器届出番号：10B2X00014B00002 クラスⅠ 製造販売元：株式会社 群馬コイケ

※ヨーク式は受注発注製品です。

代理店

OX230116-2512-07-500-32